首页 新闻 博问

专区 闪存

班级

代码改变世界













第五課-Channel Study TCP Listener & Web Service Listener

示例描述:

我们将研究如何获取相当常见的HL7 v2消息并将其映射到自定义Web Service接口服务。在许多实际情况下,当我们要连接到HIE,EMPI,数据仓库或数据存储库时,必须这样做。此用例说明了从ADT A01(入院)提取患者人口统计数据并为调用web service接口服务构建自定义XML结构入参是多么简单。

信道1 WSDL-R For Web Service Listener: 创建Mirth的webservice接口服务

- Source: WS Listener
- Destination: Generic Channel Output (do nothing)

信道2 WSDL-S For TCP Listener: 创建TCP接口服务


- Source: 通过TCP/IP Listener 接收原始系统发来的HL7V2消息.
- Destination: 通过WS Sender 发送格式化为XML串的消息给 信道1
- Destination Transformer: 完成HL7 V2 到 WSDL XML的转换

信道1 WSDL-R For Web Service Listener 的创建

1.点击信道



2.点击 新信道

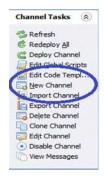

3.提供信道的名称并设置数据类型

公告

昵称: 潤沁網路大學 园龄: 1年10个月 粉丝: 2 关注: 0

<	2021年3月		
日	_	=	Ξ
28	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	31
4	5	6	7

搜索



常用链接

我的随笔 我的评论 我的参与 最新评论 我的标签

我的标签

Mirth(18) HL7(7) DataBase(2)

随笔分类

DataBase(2) HL7(7) Mirth(15)

随笔档案

2021年2月(2) 2021年1月(20)


文章分类

Mirth(3)

最新评论

1. Re:第八課-Channel Study Custom JAR Lib 受益匪浅!!!

阅读排行榜

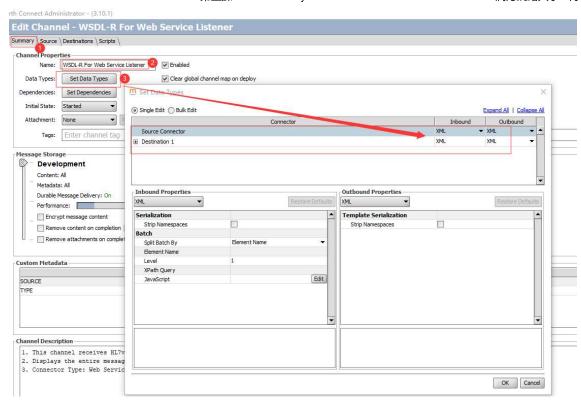


- 1. HL7传输协议(161)
- 2. 第壹課-Install: Mirth Coni 安装步骤(99)
- 3. 开篇:Mirth Connect系统集 5)
- 4. HL7标准的版本(75)
- 5. 第三課: 信道学习Source C Destinations File Writer(60)

评论排行榜


1. 第八課-Channel Study For R Lib(1)

4.源中选择Web Service Listener作为源连接器类型:

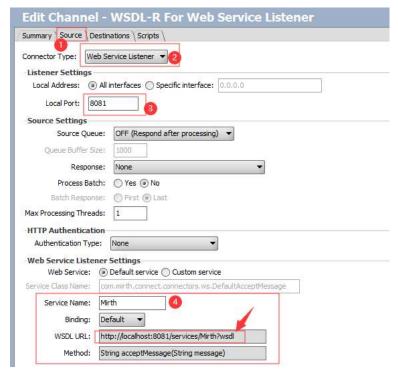


5.源中选择Web Service Listener作为源连接器类型:


添加一个转换器步骤。该转换器将显示收到的消息

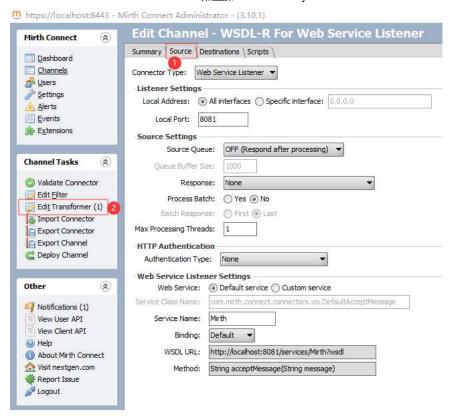


logger.info(connectorMessage.getRawData())

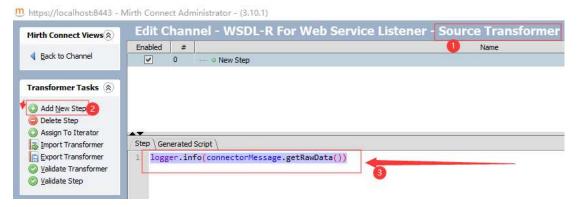


6. 单击"Destinations"选项卡,然后选择"Channel Writer"

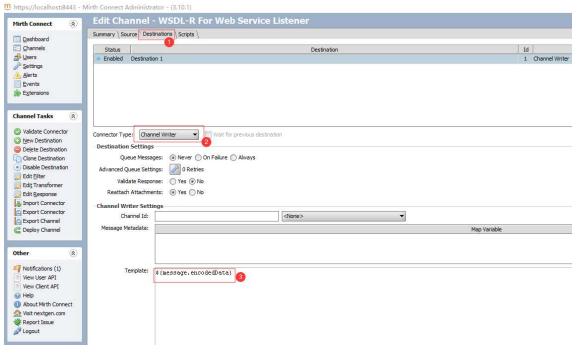

7.最后一步是保存和部署信道:

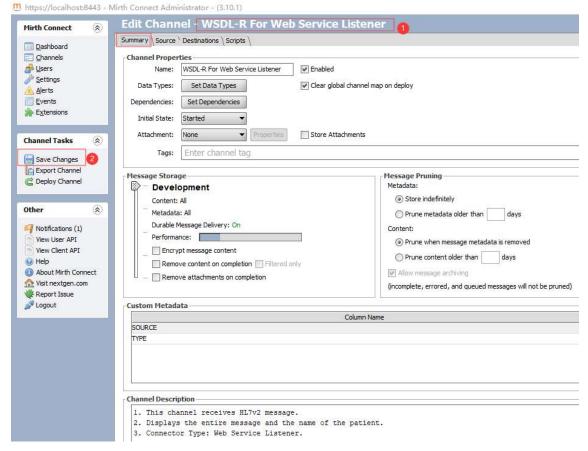

部署信道:

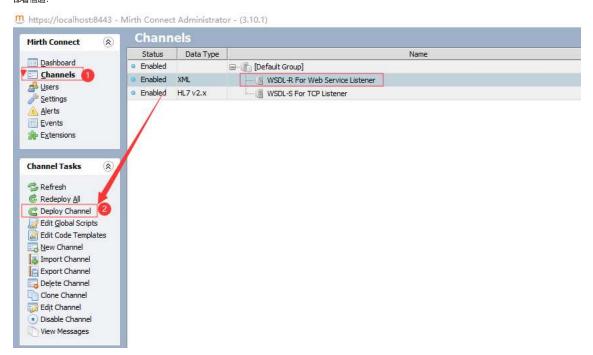


信道2 WSDL-S For TCP Listener 的创建


1.点击信道




2.点击 新信道

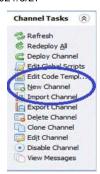


3.提供信道的名称并设置数据类型

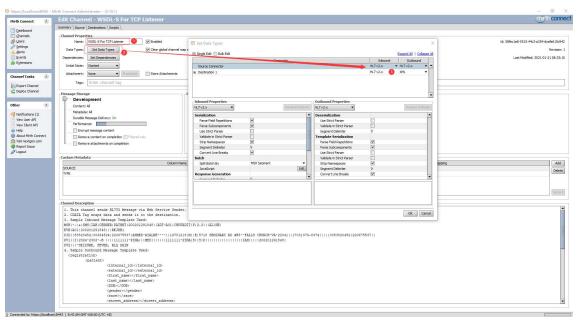

4.选择" TCP Listener"作为"源连接器"类型

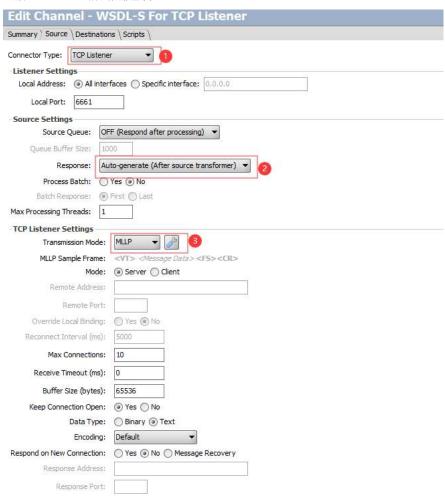

5.单击Destinations左侧的'Eidt Transformer'菜单,添加一个JavaScript步骤。在这里,我们将HL7v2消息映射到xml。我们需要提供样本HL7v2消息作为传入消息模板,并提供样本xml消息作为传出消息模板。

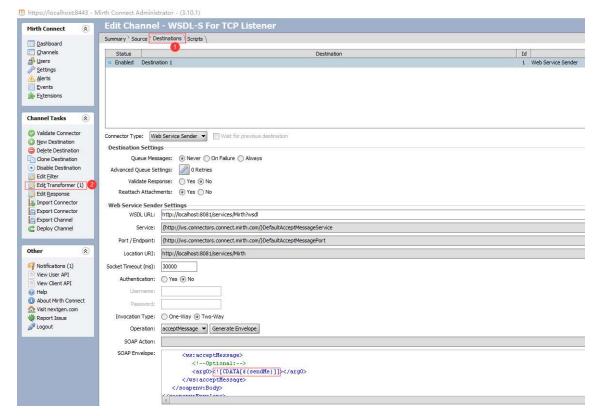

HL7 V2传入消息模板:

MSH|^~\&|SMS|IAH|CERNER|PATHNT|200201291848||ADT^A01|CHPFADIT|P|2.3|||AL|NE|

EVN|A01|200201291848|||REJKB1

PID||53820452|00664524|220675537|AHMED^AYALNE^^^||19781218|M||E|5718 SEMINARY RD #B5^^FALLS CHURCH^VA^22041|| (703)379-8374|||||0053820452|220675537||

PV2|||^SEIZURE, FEVER, RLQ PAIN

XML传出消息模板:

<registration>

<patient>

<internal_id></internal_id>

<external_id></external_id>

<first_name></first_name>

<last_name></last_name>

<DOB></DOB>

<gender></gender>

<race></race>

<street_address></street_address>

<city></city>

<state></state>

<zip></zip>

<phone></phone>

<patient_account_no></patient_account_no>

<ssn></ssn>

</patient>

<event>

<type></type>

<datetime></datetime>

<sending_facility></sending_facility>

</event>

<physician_attending>

<id></id>

<last_name></last_name>

</physician_attending>


<physician_admitting>

<id></id>


<last_name></last_name>

</physician_admitting>

</registration>

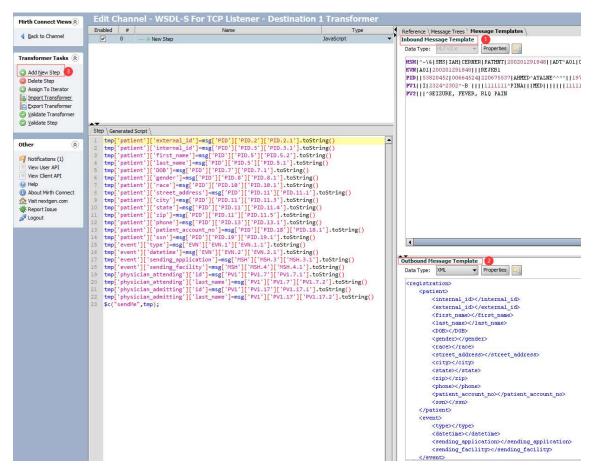

6.单击"Destinations", 然后从下拉列表中选择"Web Service Sender"

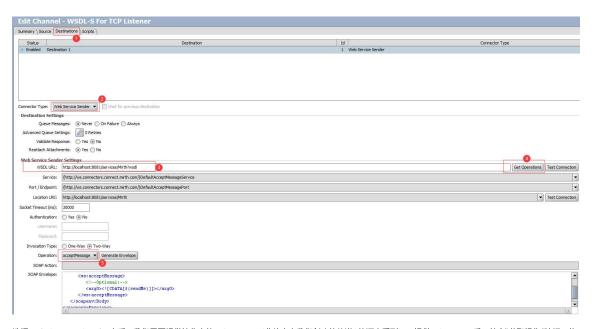


选择Web Service Sender之后,我们需要提供接收方的WSDL URL(此值来自我们创建的信道2的源中看到)。提供WSDL URL后,单击"获取操作"按钮,将自动填充服务、端口、端点,位置URI等值。

7.在同一屏幕上,单击Generate Envelope,这将生成SOAP 信封:



我们需要将<![CDATA[]]>从屏幕的右下方拖动到尖括号内,我们需要放入\${sendMe},该值也来自CDATA所在的同一窗格。一旦将"sendMe"放入CDATA中,就需要将CDATA放入<arg0>标签中。

8.最后一步是保存和部署通道。

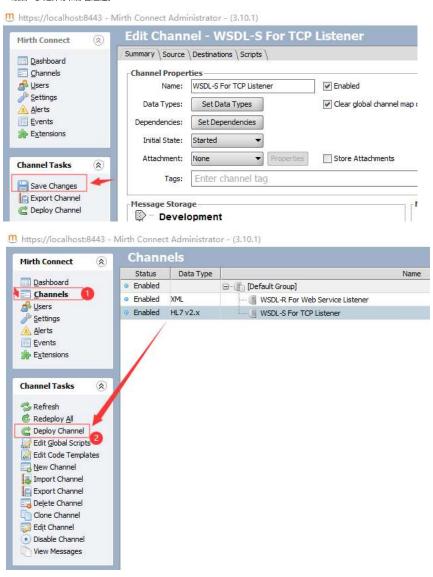

通过这个示例,我们学习了Mirth Connect的以下知识:

1.Source: TCP/IP Listener & WS Listener

2.Destination: WS Sender


3.Destination Transformer: HL7 V2 TO WSDL



posted @ 2021-01-21 09:15 潤沁網路大學 阅读(43) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部



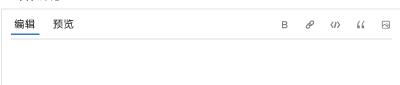

支持 Markdown	
	♡ 自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】大型组态、工控、仿真、CAD\GIS 50万行VC++源码免费下载!

【推荐】亚马逊云科技在线研讨会:借助图神经网络实现实时欺诈检测

【推荐】华为开发者联盟--邀友同注册,解锁阶梯"豪"礼

【推荐】限时秒杀!国云大数据魔镜,企业级云分析平台

园子动态:

· 发起─个开源项目: 博客引擎 fluss 云计算之路-新篇章-出海记: 开篇 博客园2005年6月1日首页截图

最新新闻:

- ·黄峥勇退:一年之内卸任CEO和董事长 想去"寻找幸福"
- 百度二次上市,三重价值
- · 快手三年游戏路,路在何处?
- 谷歌涂鸦庆祝爱尔兰圣帕特里克节
- · NASA的SMA轮胎技术即将商用 30倍于钢的可恢复应变
- » 更多新闻...

Copyright © 2021 潤沁網路大學 Powered by .NET 5.0 on Kubernetes

潤沁網路大學